

AL TUO FIANCO OVUNQUE



HOME CARE

Ausili per l'Home Care di pazienti diversamente abili ed anziani con difficoltà motorie:
poltrone reclinabili ed elevabili, sedie da comodo, deambulatori, rollator, stampelle, tripodi, quadripodi, bastoni, aste porta flebo, tavolini, rialzi per WC, sedili da doccia e bagno, riabilitazione, dispositivi per la prevenzione del decubito, etc.

DUBLINO

Poltrona reclinabile ed elevabile a uno e a due motori, dal design moderno.

È la poltrona ideale per essere adattata ad ogni tipo di arredamento, anche agli spazi più ristretti, per avere il massimo del relax ed alzarsi senza fatica.



COTONE GRIGIO
Ref. 401000 1 motore
Ref. 401010 2 motori



COTONE BLU
Ref. 401001 1 motore
Ref. 401011 2 motori



COTONE BORDEAUX
Ref. 401002 1 motore
Ref. 401012 2 motori

Dispositivo Medico di Classe I

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con una maggiore imbottitura per appoggio nuca e testa
- > Braccioli arrotondati con ampia base d'appoggio
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore reclina lo schienale e solleva il poggiatesta in un unico movimento
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente inclinazione dello schienale e movimentazione del poggiatesta
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

SPECIFICHE TECNICHE

Versione 1 motore - regolazione elettrica in 3 posizioni



Versione 2 motori - regolazione elettrica in 5 posizioni



Dimensioni in cm										
	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	PROFONDITÀ TOTALE	LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ SEDUTA	PESO		
Poltrona DUBLINO 1 motore	73	106	91	166	49	47	54	35		130
Poltrona DUBLINO 2 motori	73	106	91	166	49	47	54	40		130

MADRID

Madrid è la **poltrona reclinabile ed elevabile** a uno e a due motori che, grazie alla sua linea **slim**, contiene l'ingombro in larghezza. Il suo design non pregiudica tuttavia il comfort garantito dalla **soffice imbottitura** dello schienale e dalla profondità standard della seduta, del tutto in linea con quella delle altre poltrone. Coniugando spirito **classico** e **moderno**, la Madrid è disponibile in quattro varianti colore per soddisfare tutte le esigenze e gusti d'arredo.



MICROFIBRA BORDEAUX
Ref. 401050 1 motore
Ref. 401060 2 motori

MICROFIBRA CORALLO
Ref. 401051 1 motore
Ref. 401061 2 motori

MICROFIBRA BLU
Ref. 401052 1 motore
Ref. 401062 2 motori

MICROFIBRA VERDE OLIVA
Ref. 401053 1 motore
Ref. 401063 2 motori

Dispositivo Medico di Classe I

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con imbottitura extra per garantire il massimo del comfort a persone di tutte le stature
- > Braccioli ad ala di gabbiano con ampia base d'appoggio
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore reclina lo schienale e solleva il poggiatesta in un unico movimento
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente inclinazione dello schienale e movimentazione del poggiatesta
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

SPECIFICHE TECNICHE

Versione 1 motore - regolazione elettrica in 3 posizioni



Versione 2 motori - regolazione elettrica in 5 posizioni



Dimensioni in cm	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	PROFONDITÀ TOTALE	LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
Poltrona MADRID 1 motore	72	100	90	165	50	47	50	35	130
Poltrona MADRID 2 motori	72	100	90	165	50	47	50	40	130

GINEVRA

Poltrona reclinabile ed elevabile a uno e a due motori, dalla **linea classica**, avvolgente ed elegante che la rendono particolarmente adatta in qualsiasi tipo di ambiente e piacevole a persone di tutte le età.

L'imbottitura extra dello schienale e le **alette poggiatesta** garantiscono il massimo comfort in tutte le posizioni.



MICROFIBRA COFFEE
Ref. 401020 1 motore
Ref. 401030 2 motori



MICROFIBRA BEIGE
Ref. 401021 1 motore
Ref. 401031 2 motori



MICROFIBRA BLU
Ref. 401022 1 motore
Ref. 401032 2 motori

Dispositivo Medico di Classe I

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con imbottitura extra per garantire il massimo del comfort a persone di tutte le stature
- > Braccioli arrotondati con ampia base d'appoggio
- > Poggiatesta ai lati dello schienale per un confortevole appoggio del capo
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore in un unico movimento solleva il poggiatesta e reclina lo schienale fino ad un massimo di 135°
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente movimentazione del poggiatesta e inclinazione dello schienale fino 170°, raggiungendo la posizione sdraiata
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

SPECIFICHE TECNICHE

Versione 1 motore - regolazione elettrica in 3 posizioni



Versione 2 motori - regolazione elettrica in 6 posizioni



Dimensioni in cm	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	PROFONDITÀ TOTALE	LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
Poltrona GINEVRA 1 motore	80	107	90	173	54	53	50	46	170
Poltrona GINEVRA 2 motori	80	107	90	182	54	53	50	51	170

OSLO

Poltrona reclinabile ed elevabile dalle linee morbide ed accoglienti caratterizzata dalla presenza di molti accessori che ne arricchiscono il design e la praticità d'uso. Il **meccanismo di spostamento** su quattro ruote indipendenti e il **maniglione di spinta** permettono di movimentare agevolmente la poltrona, anche con la persona seduta. Le **alette poggiatesta amovibili** e i **braccioli rimovibili** agevolano i movimenti di traslazione dalla poltrona al letto e viceversa. Dotata di **2 motori**; uno consente i classici **movimenti sdraiato** e **"alza in piedi"**, mentre il secondo è destinato al **sistema di sollevamento** che permette all'utilizzatore di elevare il piano della poltrona per facilitare il passaggio dalla poltrona stessa al letto o alla carrozzina, eliminando dislivelli che rendono difficoltosi tutti gli spostamenti.



PU NERO
Ref. 401040



PU AVORIO
Ref. 401041



Dispositivo Medico di Classe I

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico avvolgente con soffice imbottitura anatomica per offrire comfort ed una posizione corretta
- > Braccioli facilmente estraibili per rendere agevoli gli spostamenti e permettere di avvicinare la poltrona al tavolo
- > Alette poggiatesta amovibili per un confortevole appoggio del capo
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La poltrona è disponibile solo nella versione a 2 motori: uno permette sia di reclinare lo schienale e sollevare il poggiatesta in un unico movimento, sia la posizione "alza in piedi"; l'altro consente di elevare la base della poltrona fino ad un massimo di 18 cm
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.4 ruote piroettanti da 10 cm
- > Dotata di maniglione di spinta per mobilitare agevolmente la persona all'interno dell'abitazione
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando

SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione elettrica in 4 posizioni



Dimensioni in cm									
	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	PROFONDITÀ TOTALE	LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
Poltrona OSLO 2 motori	74	109	87	173	56	53	54	50	170

OSLO VM

L'unicità delle caratteristiche della poltrona reclinabile ed elevabile Oslo è arricchita, nella versione **VM**, dalle funzioni **vibromassaggio e riscaldamento**. Il complesso meccanismo di vibromassaggio integrato effettua un dolce massaggio che **stimola la circolazione sanguigna, contribuisce a rivitalizzare il tono muscolare** e regala una piacevole sensazione di **benessere e relax**.

La qualità dei materiali, i diversi programmi con cui poter massaggiare differenti parti del corpo, così come la possibilità di sollevare e abbassare seduta, schienale e poggiatesta, sfruttando anche la zona che riscalda per **lenire tensioni o irrigidimenti**, rendono la poltrona Oslo VM una scelta d'elezione per chi desidera unire rilassamento a cura di sé. Un comodo e pratico complemento d'arredo non solo per anziani o persone con problemi di mobilità ma anche per quegli utenti che amano rilassarsi al termine della giornata, associando al **comfort** della poltrona i **benefici** di un massaggio.



Dispositivo Medico di Classe I


CARATTERISTICHE

- > La poltrona relax massaggiante Oslo VM, oltre alle caratteristiche della Oslo, coniuga i due aspetti che vanno per la maggiore e che tanti vogliono ritrovare: una migliore qualità della vita ed una piacevole sensazione di comfort e benessere in tutto il corpo
- > Sfruttando il sistema dell'oscillazione massaggiante, attraverso otto motorini vibranti, la poltrona si occupa di stimolare diverse parti del corpo (schiena, lombari, glutei e gambe) con una potenza variabile, ideale per tutte le esigenze
- > All'altezza delle spalle i corpi vibranti favoriscono lo scioglimento di tensioni nell'area cervicale consentendo il rilassamento del collo e delle fasce muscolari della schiena
- > Nella regione lombare, grazie all'uso controllato e continuativo del trattamento vibromassaggiante, si possono avere notevoli benefici nel trattamento di stress muscolare e defaticamento
- > Nei glutei il massaggio favorisce la circolazione del sangue e decongestiona le fasce muscolari; è particolarmente indicato per le persone che conducono una vita spiccatamente sedentaria
- > Nella zona delle gambe, all'altezza dei polpacci, il vibromassaggio favorisce l'irrorazione sanguigna, e, se applicato mentre la poltrona è in posizione orizzontale, facilita il flusso ematico nelle zone periferiche del corpo
- > Un telecomando multifunzione con schermo LCD, facile da usare, per programmare il timer, scegliere fra 10 programmi di massaggio preimpostati e 10 differenti livelli di intensità o una selezione manuale che consente all'utente di personalizzare il massaggio ottimizzandone il risultato
- > Grazie a un sistema di riscaldamento posizionato nella zona lombare, funzionale per chi, oltre al massaggio, apprezza anche l'azione lenitiva del calore, la poltrona Oslo VM distende e infonde relax e piacevolezza
- > La realizzazione del rivestimento in un materiale come il Poliuretano, facilmente gestibile in termini di cura quotidiana, conferisce praticità ed eleganza alla poltrona

SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione elettrica in 4 posizioni

Dimensioni in cm	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA TOTALE	PROFONDITÀ TOTALE	LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PROFONDITÀ SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
Poltrona OSLO VM 2 motori	74	109	87	173	56	53	54	50	170

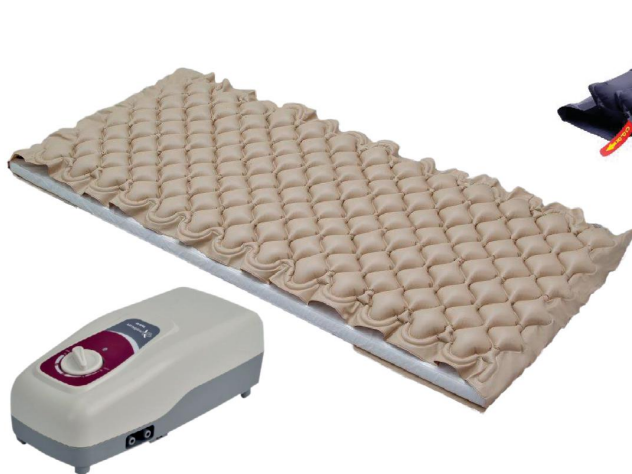

KIT MATERASSO A BOLLE D'ARIA E COMPRESSORE

con regolazione a ciclo alternato

MC 2500M

Ref. 400751

CARATTERISTICHE

- > Semplice installazione, uso e manutenzione
- > Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
- > Funzionamento a ciclo alternato per prevenire la formazione di piaghe da decubito
- > Il compressore è munito di ganci per essere posizionato ai piedi del letto
- > Materasso costituito da 130 celle in PVC atossico
- > Dotato di risvolti per un miglior fissaggio al materasso
- > Tutte le parti del materasso sono lavabili
- > Kit di riparazione incluso

SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

- > Dimensioni (compresi lembi di fissaggio) 280 cm (L) x 90 cm (P) x 6,5 cm (H)
- > Colore Beige
- > Peso 2 kg
- > Portata max 130 kg

SPECIFICHE TECNICHE COMPRESSORE

- > Alimentazione 220V/50 Hz
- > Fuoriuscita d'aria >4,5 litri al minuto
- > Pressione erogata 45 - 110 mmHg
- > Tempo del ciclo 12 minuti
- > Potenza 7 W
- > Fusibile 1A
- > Dimensioni 24,5 cm (L) x 12 cm (P) x 9,3 cm (H)
- > Peso 930 g



LEGGERO
E DI SEMPLICE
UTILIZZO



GANCI
DI SOSTEGNO



LEMBI
DI FISSAGGIO



130 CELLE



PORTATA
MAX
130 KG


Cod. class. ISO

03.33.06.018

PARTI DI RICAMBIO

Materasso Bolle D'aria 2500m

Ref. 409780

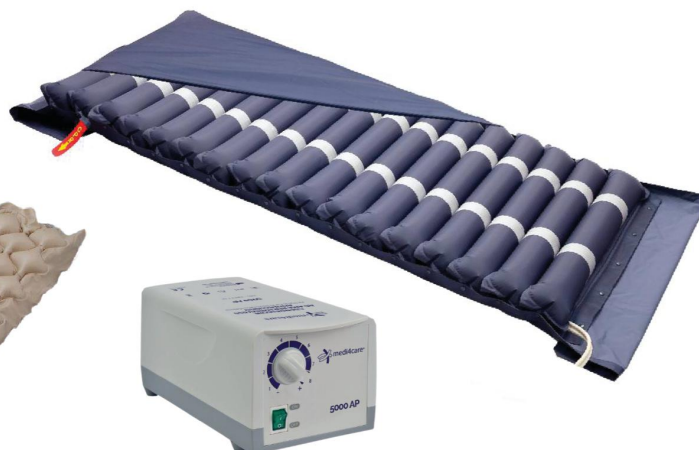

KIT MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE

con regolazione a ciclo alternato

MC 5000M

Ref. 400752

CARATTERISTICHE

- > Semplice installazione, uso e manutenzione
- > Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
- > Funzionamento a ciclo alternato per prevenire la formazione di piaghe da decubito
- > Il compressore è munito di ganci per essere posizionato ai piedi del letto
- > 17 elementi intercambiabili in nylon/PVC atossico, posizionabili singolarmente attraverso appositi bottoni
- > I primi 3 elementi sono statici e rimangono gonfi per offrire sostegno all'area cervicale garantendo il massimo comfort al paziente
- > Provvisto di valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) per uno sgonfiaggio rapido del materasso in caso di interventi di rianimazione urgenti
- > Rivestimento impermeabile all'acqua e permeabile all'aria che non provoca frizioni e tiene uniti tutti gli elementi per una migliore compattezza
- > Dotato di risvolti per un miglior fissaggio al materasso
- > Tutte le parti del materasso sono lavabili

SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

- > Dimensioni 190 cm (L) x 88 cm (P) x 11 cm (H)
- > Colore blu
- > Peso 4,7 kg
- > Portata max 140 kg

SPECIFICHE TECNICHE COMPRESSORE

- > Alimentazione 220V/50 Hz
- > Fuoriuscita d'aria 5/6 litri al minuto
- > Pressione erogata 40 - 100 mmHg
- > Tempo del ciclo 12 minuti
- > Potenza 7 W
- > Fusibile 1A
- > Dimensioni 22,4 cm (L) x 10,8 cm (P) x 10,3 cm (H)
- > Peso 1,4 kg



LEGGERO
E DI SEMPLICE
UTILIZZO



GANCI
DI SOSTEGNO



LEMBI
DI FISSAGGIO



RIVESTIMENTO
IMPERMEABILE
E TRASPIRANTE



17 ELEMENTI
INTERCAMBIABILI




FUNZIONE
CUSCINO



PORTATA
MAX
140 KG

Cod. class. ISO

03.33.06.021

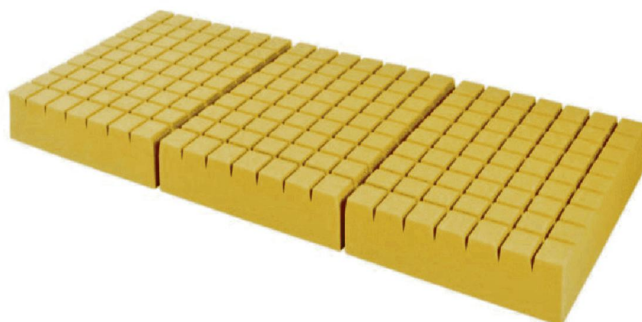

MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO a 3 sezioni

CARATTERISTICHE

- > Materasso in poliuretano espanso a tre sezioni per agevolare l'impiego su letti articolati
- > La lavorazione a tronco di piramide favorisce la traspirazione e mantiene il microclima ottimale
- > Densità 30 kg/m³

SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 190 (3 x 63 cm) x 85 x 12,5 cm
- > Portata max 130 kg

Cod. class. ISO

03.33.06.003

ACCESSORI

- Fodera in cotone e poliestere con cerniera 198 x 90 x 15 cm
- Fodera ignifuga impermeabile in PU con cerniera 198 x 90 x 15 cm

Ref. 400755

Ref. 409790

Ref. 409791

MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO COMPOSITO a scarichi differenziati

CARATTERISTICHE

- > Materasso in poliuretano espanso a sezione unica realizzato con 3 lastre di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee
- > Sponde laterali di contenimento densità 32 kg/m³
- > Zona per la testa densità 29 kg/m³
- > Zona tronco-bacino densità 34 kg/m³;
- > Zona forata per i piedi densità 31 kg/m³
- > Munito di fodera di contenimento

SPECIFICHE TECNICHE


- Ref. 400756 > Dimensioni 198 x 90 x 15 cm
- > Portata max 130 kg

Cod. class. ISO

03.33.06.006

ACCESSORI

- Ref. 409790 Fodera in cotone e poliestere con cerniera 198 x 90 x 15 cm
- Ref. 409791 Fodera ignifuga impermeabile in PU con cerniera 198 x 90 x 15 cm

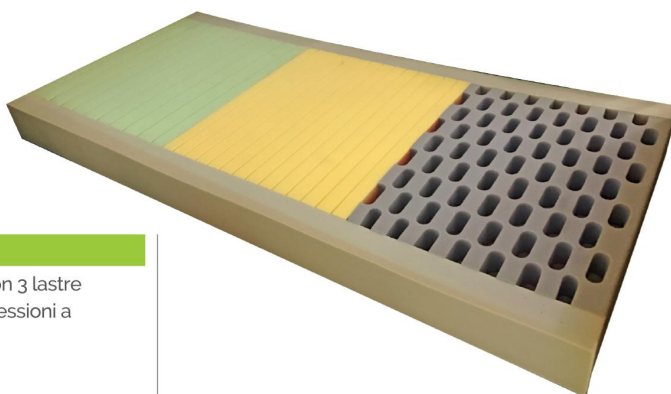

I Cuscini antidecubito Medi4care sono progettati per dare assistenza e supporto a tutti quei pazienti (disabili, persone con limitata mobilità o che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta) che presentano un elevato rischio di sviluppare piaghe da decubito.





CUSCINO A BOLLE D'ARIA A MICROINTERSCAMBIO


in PVC e gomma medica

CARATTERISTICHE

- > Il cuscino a bolle d'aria protegge dal rischio di formazione di piaghe da decubito e dalle lesioni dei tessuti
- > La combinazione dei materiali, PVC e gomma medica, permette di mantenere le celle morbide garantendo comfort e stabilità al paziente
- > Le celle a microinterscambio garantiscono una distribuzione uniforme del peso
- > Il cuscino a bolle d'aria è altamente conformabile all'anatomia dei pazienti i cui punti ischemici si immergono completamente nel cuscino favorendo una distribuzione regolare della pressione
- > Copricuscino in tessuto elastico traspirante che permette il ricircolo dell'aria ad ogni movimento del paziente
- > La base d'appoggio del copricuscino in materiale antiscivolo assicura il cuscino alla sedia ed aiuta ad aumentare la stabilità dell'utilizzatore, garantendo così la sua efficacia terapeutica
- > Gonfiaggio facile e regolabile
- > Leggero e facile da trasportare e pulire
- > Kit di riparazione e pompa per il gonfiaggio inclusi

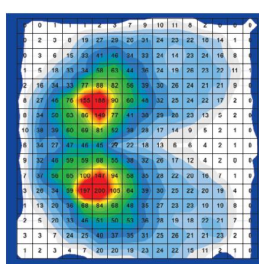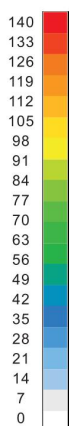

Livello di pressione prima dell'uso del cuscino

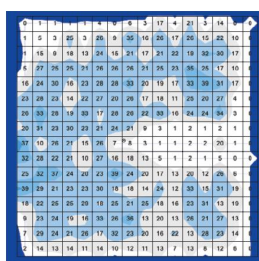

Livello di pressione dopo l'uso del cuscino

SPECIFICHE TECNICHE

REF	ALTEZZA	VALVOLE	DIMENSIONI	COLORE
400760	6 cm	1	40X40 cm	Grigio
400761	6 cm	1	45X40 cm	Grigio
400762	10 cm	1	40X40 cm	Grigio
400763	10 cm	1	45X40 cm	Grigio



LEGGERO
E DI SEMPLICE
UTILIZZO



PORTATA
MAX
130 KG

Cod. class. ISO

03.33.03.015

CUSCINO ANATOMICO VISCOELASTICO

CARATTERISTICHE

- > Cuscino a conformazione anatomica in polimero viscoelastico compatto che garantisce comfort e stabilità al paziente e previene la genesi delle lesioni da pressione
- > La fodera in PU elasticizzata, lavabile e rimovibile mediante cerniera, è ignifuga ed impermeabile ai liquidi.
- > Fodera con base antiscivolo
- > Munito di strisce in velcro per il fissaggio del cuscino alla carrozzina ed evitarne lo scivolamento


SPECIFICHE TECNICHE

REF	ALTEZZA	DIMENSIONI
400785	6 cm	41X41 cm
400786	6 cm	46X41 cm

Cod. class. ISO

03.33.03.009



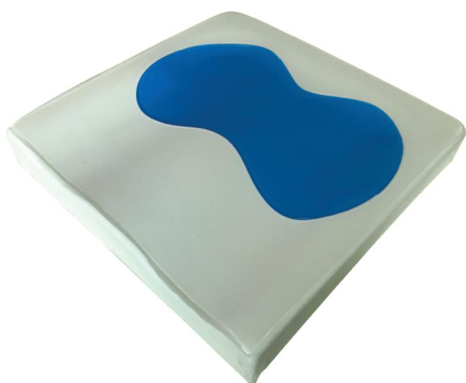

Ref. 400775

Ref. 400776

CUSCINO PREFORMATO CON GEL AUTOMODELLANTE

CARATTERISTICHE

- > Cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata integrata con gel automodellante, adatto per pazienti utilizzatori di carrozzine e lungodegenti
- > Realizzato con base in schiuma viscoelastica di poliuretano a "lenta memoria" e gel automodellante che permette di alleviare la pressione sulle zone di contatto maggiormente a rischio di decubito durante la seduta
- > Fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo
- > Dotato di maniglia per facilitarne il trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 41x41x7 cm
- > Dimensioni 44x44x7 cm

Cod. class. ISO
03.33.03.012

CUSCINO PREFORMATO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI

CARATTERISTICHE

- > Cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti, adatto per prevenire la formazione di piaghe nei pazienti utilizzatori di carrozzine e lungodegenti che necessitano di un supporto particolarmente efficace e confortevole
- > Costituito da una base preformata in schiuma compatta, ad alta densità ed alta resilienza, e da uno strato di gel (cooling effect) fluido viscoelastico
- > Fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo
- > Dotato di maniglia per facilitarne il trasporto

SPECIFICHE TECNICHE

Ref. 400780 > Dimensioni 41x41x7 cm

Ref. 400781 > Dimensioni 44x44x7 cm

Cod. class. ISO
03.33.03.012



Ref. 400770

Ref. 400771

CUSCINO IN GEL FLUIDO

CARATTERISTICHE

- > Il cuscino in gel fluido garantisce l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta
- > L'interno è composto da gel fluido racchiuso tra 2 lastre di poliuretano espanso
- > Dotato di fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo

SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 40x40x5 cm
- > Dimensioni 45x40x5 cm

Cod. class. ISO
03.33.03.006



Ref. 400765

Ref. 400766

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA

CARATTERISTICHE

- > Cuscino a tre sezioni per la prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata garantisce al cuscino morbidezza e traspirabilità
- > Rivestito da entrambi i lati in tessuto di cotone 100% sanforizzato
- > Dotato di duplice velcro di fissaggio alla sedia e/o alla carrozzina

SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 40x40x10 cm

- > Dimensioni 45x40x10 cm

Cod. class. ISO 03.33.03.003

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO

CARATTERISTICHE

- > Cuscino con foro centrale per la prevenzione delle lesioni da decubito in zone particolarmente sensibili e per problemi prostatici
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata garantisce al cuscino morbidezza e traspirabilità
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca

SPECIFICHE TECNICHE

Ref. 400769 > Dimensioni 42x42x10 cm

Cod. class. ISO 03.33.03.003



Ref. 400791

TALLONIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA

CARATTERISTICHE

- > La protezione per tallone garantisce al paziente l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio in zone corporee particolarmente a rischio
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata riduce la pressione d'appoggio del tallone ed evita le frizioni e conseguenti irritazioni cutanee
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca
- > Dotata di una pratica chiusura regolabile in velcro

SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 14x10x3 cm

Cod. class. ISO 03.33.09.006

GOMITIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA

CARATTERISTICHE

- > La protezione per gomito garantisce al paziente l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio in zone corporee particolarmente a rischio
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata riduce la pressione d'appoggio del gomito ed evita le frizioni e conseguenti irritazioni cutanee
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca
- > Dotata di una pratica chiusura regolabile in velcro

SPECIFICHE TECNICHE

Ref. 400790 > Dimensioni 30x15x11 cm

Cod. class. ISO 03.33.09.012






BASTONE IN LEGNO

CARATTERISTICHE

- > Altezza 93 cm
- > Puntale antiscivolo
- > Disponibili nei colori marrone e nero



Ref. 400251	Bastone in legno manico curvo	ø 22mm	marrone
Ref. 400252	Bastone in legno manico curvo	ø 22mm	nero
Ref. 400271	Bastone in legno manico ad uncino	ø 25mm	marrone
Ref. 400272	Bastone in legno manico ad uncino	ø 25mm	nero
Ref. 400261	Bastone in legno manico a T	ø 22mm	marrone
Ref. 400262	Bastone in legno manico a T	ø 22mm	nero

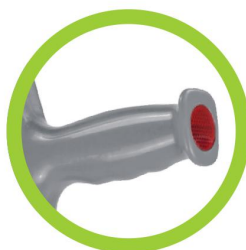

Ref. 400201 grigio
Ref. 400202 blu
Ref. 400203 rosso
Ref. 400204 verde

STAMPELLA CANADESE

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato leggero
- > 10 livelli di regolazione in altezza
- > Appoggio antibrachiale
- > Impugnatura ergonomica con rifrangente sul fronte
- > Puntale antiscivolo in gomma
- > Disponibile in vari colori

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PESO	PORTATA MAX
90-112 cm	0,40 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.03.06.003

STAMPELLA CANADESE

con appoggio soft

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato leggero
- > 10 livelli di regolazione in altezza ogni 2,5 cm
- > Appoggio antibrachiale
- > Impugnatura ergonomica, antiscivolo e morbida con rifrangente sul fronte
- > Anello antirumore sull'asta scorrevole
- > Puntale antiscivolo in gomma
- > Disponibile nei colori grigio e nero

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PESO	PORTATA MAX
92-116 cm	0,45 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.03.06.003



Ref. 400211 grigio
Ref. 400212 nero





Ref. 400301

TRIPODE

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio
- > Regolabile in altezza
- > Impugnatura ergonomica
- > Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- > Base con rinforzo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PESO	PORTATA MAX
74-97 cm	0,76 kg	113 kg

Cod. class. ISO

12.03.15.003



Ref. 400351

QUADRIPODE

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio
- > Regolabile in altezza
- > Impugnatura ergonomica
- > Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- > Base con rinforzo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PESO	PORTATA MAX
74-97 cm	0,78 kg	113 kg

Cod. class. ISO

12.03.18.003

QUADRIPODE HD

CARATTERISTICHE

- > Struttura a base larga in alluminio anodizzato
- > Regolabile in altezza
- > Ultra resistente (heavy duty)
- > Manico chiuso con impugnatura anatomica
- > Puntali in gomma antiscivolo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PESO	PORTATA MAX
68-91 cm	0,8 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.03.18.003

Ref. 400355 verde
Ref. 400356 bordeaux



Ref. 400601

DEAMBULATORE articolato

CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole articolato ad un pulsante con struttura in alluminio e barra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolazione in altezza ad otto differenti livelli
- > Quattro puntali in gomma antiscivolo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
78-96 cm	47 X 46 cm	2,4 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.03.006 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130



Ref. 400501

DEAMBULATORE pieghevole fisso

CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole fisso a due pulsanti con struttura in alluminio e sbarra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza ad otto differenti livelli
- > Quattro puntali in gomma antiscivolo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
79-96 cm	48 X 44 cm	2,6 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.03.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130

DEAMBULATORE fisso a doppia impugnatura

CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole fisso a un pulsante con struttura in alluminio
- > Doppio livello dell'impugnatura per facilitare il paziente nel passaggio della posizione seduta a quella eretta
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza
- > Quattro puntali in gomma antiscivolo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
74-87 cm	56 X 52 cm	2,7 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.03.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130



Ref. 400510



Ref. 400551

DEAMBULATORE 2 ruote - 2 puntali

CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole con due ruote e due puntali, a un pulsante, con struttura in alluminio e sbarra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza ad otto differenti livelli
- > Due puntali in gomma antiscivolo e due ruote da 5"

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
79-95 cm	61 X 52 cm	3 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130

ACCESSORI PER DEAMBULATORI

Ref. 409831	RUOTE PIROETTANTI DA 5"		Ref. 409832	RUOTE FISSE DA 3"	
Ref. 409830	RUOTE PIROETTANTI DA 3"		Ref. 409835	DISPOSITIVO CON FRENO A PRESSIONE	
Ref. 409833	RUOTE FISSE DA 5"		Ref. 409834	DISPOSITIVO CON FRENO A PRESSIONE E RUOTA DA 3"	

Cod. class. ISO 12.06.09.133



Ref. 400402

DEAMBULATORE
ascellare

CARATTERISTICHE

- > Deambulatori pieghevole con supporti sottoascellari in poliuretano morbido regolabili in altezza
- > Struttura in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni
- > Dotato di sedile imbottito

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
100-140 cm	78 X 55 cm	60 cm	15 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.006 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106

DEAMBULATORE
con appoggio antibrachiale a tavolino

CARATTERISTICHE

- > Deambulatori con appoggio a tavolino imbottito, con incavo, e maniglie
- > Struttura in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti da 100 mm di cui 2 con freni
- > Piano d'appoggio regolabile in altezza
- > Dotato di sedile imbottito, appoggio per la schiena e gancio porta oggetti

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
110-135 cm	73 X 64 cm	55 cm	11 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.006 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106 | 12.06.09.136



Ref. 400401

ROLLATOR pieghevole 2 ruote

CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in acciaio verniciato con ruote anteriori fisse da 5" (12,5 cm) e due puntali posteriori
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza
- > Piano seduta imbottito

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
84-94 cm	61 X 55 cm	55-65 cm	6 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106 | 12.06.09.109

Ref. 400605



Ref. 400606

ROLLATOR SKINNY pieghevole 2 ruote

CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio verniciato
- > Ruote anteriori fisse da 6" (15 cm) e due puntali posteriori
- > Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato
- > Manopole anatomiche
- > Fascia d'appoggio imbottita
- > Regolabile in altezza in 5 differenti posizioni
- > Shopping bag rimovibile

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
78-97 cm	60 X 56 cm	47-54 cm	5,5 Kg	136 Kg

Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.130 | 12.06.09.109

ROLLATOR pieghevole 4 ruote con seduta

CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in alluminio verniciato con ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori fisse da 8" (20 cm)
- > Dispositivo frenante a leva sulle ruote posteriori
- > Impugnature anatomiche
- > Manubrio regolabile in altezza
- > Seduta e schienale imbottiti
- > Dotato di cestino porta oggetti e dispositivo porta bastone e/o stampella

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
81-92 cm	61 X 61 cm	54 cm	7,5 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142 | 12.06.09.106

Ref. 400610



ROLLATOR CUBE

pieghevole compatto

CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in alluminio anodizzato, leggero e dal design elegante
- > Struttura tubolare ovale interamente richiudibile per garantire il minimo ingombro (63x30x35 cm chiuso) e per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza per un maggior comfort
- > Munito di ampio sedile, schienale, shopping bag con striscia riflettente e dispositivo porta bastone e/o stampella

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
80-93 cm	63X68 cm	54 cm	7,5 kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142



Ref. 400620



Ref. 400615

ROLLATOR ECO-CUBE

pieghevole e compatto

CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole dal design elegante che combina la leggerezza dell'alluminio alla raffinatezza della colorazione effetto legno
- > Struttura tubolare ovale interamente richiudibile per garantire il minimo ingombro (90x26,5x33 cm) e per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza per un maggiore comfort
- > Munito di ampio sedile, schienale e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Ampia borsa porta oggetti con striscia rifrangente

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREADI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
78-93 cm	69X61,5 cm	55,5 cm	5,5 Kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142





Ref. 400625

ROLLATOR URBAN

doppia funzione 4 ruote

CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio anodizzato trasformabile in carrozzina transito, pratico e comodo
- > Struttura con sistema a doppia crociera, pieghevole per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva a doppia funzione
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- > Munito di ampio sedile, schienale, shopping bag con striscia riflettente e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Pedane ribaltabili con poggia piedi e cinturino ferma tallone

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
84-97 cm	63X75 cm	55,5 cm	9,2 Kg	136 kg

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142

ROLLATOR URBAN AB

appoggio antibrachiale

CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio regolabile in altezza in 5 differenti posizioni
- > Struttura pieghevole side-to-side per garantire il minimo ingombro (23x61x100 cm) per facilitarne il trasporto
- > Ruote fisse da 8" (20 cm) con catarifrangenti laterali che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Soffici impugnature anatomiche con appoggio antibrachiale
- > Freni in acciaio doppia funzione sugli appoggi
- > Munito di ampio sedile in tessuto e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Borsa porta oggetti rimovibile con striscia rifrangente

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
100-115 cm	70X61 cm	60,5 cm	7,6 Kg	136 Kg

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.124 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142



Ref. 400626

PARTI DI RICAMBIO

Ref. 409825	Ruote per Deambulatore Ref. 400551	Ref. 409915	Puntali in Gomma per Ref. 400301
Ref. 409827	Ruote Post. 100 mm C/freno per Ref. 400402 (Paio)	Ref. 409920	Puntali in Gomma per Ref. 400351
Ref. 409828	Ruote Anter. da 100 mm per Ref. 400402 (Paio)	Ref. 409925	Puntali in Gomma per Ref. 400201-202-203-204
Ref. 409900	Puntali in Gomma per Ref. 400551	Ref. 409926	Puntali in gomma per bastoni in legno ø 22 mm
Ref. 409905	Puntali in Gomma per Ref. 400601	Ref. 409927	Puntali in gomma per bastoni in legno ø 25 mm
Ref. 409910	Puntali in Gomma per Ref. 400501	Ref. 409930	Impugnatura in PU per Ref. 400501-400551-400601

SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE ad autospinta

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote in PU di cui due da 24" (60 cm) e due da 8" (20 cm)
- > Freno a leva sulle ruote posteriori
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili regolabili in altezza con poggiamambe imbottito
- > Poggiapiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
66 cm	43 cm	50 cm	106 cm	25 kg	130 kg

Cod. class. ISO
12.21.06.003



Ref. 400053

APPOGGIATESTA per sedie da comodo

Cod. class. ISO
12.24.06.112



Ref. 409730



Ref. 400050

SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE con ruote ø 4"

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote piroettanti da 4" (10 cm) di cui le posteriori con freno
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili ribaltabili e regolabili in altezza con poggiamambe imbottiti
- > Poggiapiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
56 cm	43 cm	50 cm	106 cm	21 Kg	130 Kg

Cod. class. ISO
12.21.03.006 | 12.21.03.009

SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE con ruote ø 8"

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote piroettanti da 8" (20 cm) di cui le anteriori con freno a leva
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili regolabili in altezza con poggiatesta imbottito
- > Poggiatesta regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
62 cm	43 cm	50 cm	106 cm	22 kg	130 Kg

Cod. class. ISO

12.21.03.006 | 12.24.21.103

Ref. 400055



SEDIA COMODA con ruote

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio con quattro ruote piroettanti da 5" (12,5 cm) di cui due con freno a pedale
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane regolabili ed estraibili
- > Sedile imbottito
- > Rivestimento in similpelle idrorepellente
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
60 cm	43 cm	50 cm	88 cm	12 kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.21.03.003 | 09.12.24.003 | 09.12.24.106



Ref. 400035

SEDIA COMODA 3 IN 1

CARATTERISTICHE

- > 3 funzioni in 1: rialzo per water, sedia comoda, supporto per water
- > Struttura in acciaio
- > Regolabile in altezza
- > Braccioli e secchio in plastica
- > Puntali in gomma antiscivolo

REGOLAZIONE IN ALTEZZA	AREA DI APPOGGIO	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
57-72 cm	47 X 58 cm	37-52 cm	4,8 Kg	136 kg

Cod. class. ISO

09.12.24.003

Ref. 400030



SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO ad autospinta

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio rinforzato antiruggine ed anticorrosione
- > Leggera e versatile: può essere utilizzata come supporto per water
- > Sedile in PU con apertura anatomica per WC per consentire l'utilizzo del secchio
- > Quattro ruote in PU di cui due da 24" (60 cm) e due da 5" (12,5 cm) con freno
- > Schienale in PU estraibile
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane girevoli, estraibili con poggiatesta regolabili in altezza

					
LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
64 cm	46 cm	50 cm	99 cm	18 kg	120 kg

Cod. class. ISO

09.12.03.003 | 09.12.03.103



Ref. 400040



Ref. 400045

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO con ruote ø 5"

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio rinforzato antiruggine ed anticorrosione
- > Leggera e versatile: può essere utilizzata come supporto per water
- > Sedile in PU con apertura anatomica per WC per consentire l'utilizzo del secchio
- > Quattro ruote in PU da 5" (12,5 cm) con freno
- > Schienale in PU estraibile
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane girevoli, estraibili con poggiatesta regolabili in altezza

					
LARGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
55 cm	46 cm	50 cm	99 cm	15 kg	120 kg

Cod. class. ISO

09.12.03.003



Ref. 400101

SEBILE DA DOCCIA E/O BAGNO

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugniture laterali
- > Regolazione in altezza a otto diversi livelli
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
30X50 cm	37-50 cm	1,8 kg	113 Kg

SEGGIOLINO PER DOCCIA DA PARETE

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato ribaltabile con fissaggio a parete
- > Piedi di appoggio al pavimento
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugniture laterali
- > Regolazione in altezza
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
30X50 cm	40-55 cm	4,8 kg	113 Kg



Ref. 400102



Ref. 400110

SEBILE CON SCHIENALE DA DOCCIA E/O BAGNO

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugniture laterali
- > Regolazione in altezza a otto diversi livelli
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	DIMENSIONE SCHIENALE	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA SCHIENALE	PESO	PORTATA MAX
30X50 cm	35X50 cm	37-50 cm	70-87 cm	2,7 kg	120 kg

SEDIA DA DOCCIA PIEGHEVOLE

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio pieghevole
- > Sedile con apertura anatomica e fori per il deflusso dell'acqua
- > Regolazione in altezza
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	DIMENSIONE SCHIENALE	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA SCHIENALE	PESO	PORTATA MAX
40x41 cm	20x48 cm	46-54 cm	88-96 cm	8,2 Kg	113 Kg

Ref. 400109



Ref. 400115

SEDILE GIREVOLE PER VASCA

CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio inossidabile
- > Sedile girevole in PVC ad alta resistenza
- > Munito di braccioli

DIMENSIONE SEDUTA	DIMENSIONE SCHIENALE	AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
40X37 cm	40X37 cm	73X52 cm	4,3 kg	120 kg

SEDILE CIRCOLARE DA DOCCIA E/O BAGNO

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta circolare
- > Regolabile in altezza a diversi livelli
- > Puntali a ventosa antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	ALTEZZA SEDUTA	PESO	PORTATA MAX
Ø32 cm	38-55 cm	1,6 kg	100 kg

Ref. 400100



TAVOLA DA VASCA con maniglia e seduta rotante

CARATTERISTICHE

- > Sedile in PVC ad alta resistenza
- > Seduta girevole antiscivolo
- > Maniglia di sicurezza e staffe regolabili per un miglioramento adattamento alle dimensioni della vasca

AREA DI APPOGGIO	PESO	PORTATA MAX
75X36 cm	1,5 kg	120 kg



Ref. 400125



Ref. 400130

MANIGLIA PER VASCA DA BAGNO

CARATTERISTICHE

- > Maniglia di sicurezza in acciaio verniciato che facilita l'ingresso e l'uscita dalla vasca da bagno
- > Morsetto di fissaggio bordo vasca (larghezza massima 17,8 cm)

PESO	PORTATA MAX
2,8 kg	120 kg

SEDILO DI TRASFERIMENTO PER VASCA

CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Sedile in PVC antiscivolo
- > Schienale con impugnatura
- > Regolabile in altezza
- > Puntali a ventosa antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

DIMENSIONE SEDUTA	DIMENSIONE SCHIENALE	ALTEZZA SEDUTA	ALTEZZA SCHIENALE	PESO	PORTATA MAX
70X41 cm	35X45 cm	46-56 cm	81-91 cm	4,4 kg	120 kg



Ref. 400120

RIALZO PER WC

CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort
- > Materiale in PVC lavabile ad alta resistenza
- > Apertura frontale e posteriore per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabile



Ref. 400010 - H 10 cm
Ref. 400015 - H 15 cm



Ref. 400020 - H 10 cm
Ref. 400025 - H 15 cm

RIALZO PER WC con coperchio

CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort all'utente e facilita una corretta postura
- > Materiale in PVC ad alta resistenza, lavabile, con coperchio
- > Apertura frontale e posteriore per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabili



Ref. 400005

RIALZO PER WC con braccioli

CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica
- > Sistema di bloccaggio anteriore semplice e sicuro
- > Solleva il livello del wc di 12,5 cm
- > Appoggi dei braccioli in poliuretano
- > Superficie facilmente lavabile
- > L'incavo frontale facilita l'accessibilità per l'igiene personale.



Ref. 400028

RIALZO PER WC SOFT H 10 cm

CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort
- > Materiale in PU Soft, morbido al contatto, lavabile e resistente al deterioramento
- > Apertura frontale per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabili



ASTA PORTA FLEBO

CARATTERISTICHE

- > Asta porta flebo in acciaio cromato composta da due tubolari inseriti uno nell'altro
 - > Regolabile in altezza
 - > Dotata di quattro ganci per flaconi per infusioni di farmaci e soluzioni
- Base a 5 razze su ruote

	
REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PORTATA MAX
133-223 cm	2kg x gancio



Ref. 400651 base in plastica
Ref. 400652 base in alluminio



Ref. 400701

SOSTEGNO PER SCHIENA

CARATTERISTICHE

- > Sostegno per schiena da letto
- > Struttura in acciaio verniciato
- > Regolabile in cinque diverse posizioni
- > Rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito
- > Colore blu

		
DIMENSIONE BASE	REGOLAZIONE IN ALTEZZA	PORTATA MAX
54x58 cm	30-54 cm	120 kg

LETTINO PER VISITA MEDICA

CARATTERISTICHE

- > Lettino in acciaio verniciato
L 190 x P 65 x H 75 cm
- > Imbottitura in poliuretano
con rivestimento in similpelle lavabile
- > Barra portarotolo
- > Schienale regolabile


PORTATA MAX
180 kg



Ref. 400660



Ref. 400951

TAVOLINO MULTIUSO doppio piano inclinabile

CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Doppio piano inclinabile con bordi di contenimento
- > Regolabile in altezza
- > Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
- > Colore marrone scuro

		
DIMENSIONE PIANO PICCOLO	DIMENSIONE PIANO GRANDE	REGOLAZIONE IN ALTEZZA
40 X 20 cm	40 X 68 cm	73-125 cm

TAVOLINO MULTIUSO inclinabile

CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Piano unico in laminato regolabile in inclinazione
- > Regolabile in altezza
- > Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
- > Colore marrone

	
DIMENSIONE PIANO	REGOLAZIONE IN ALTEZZA
41 X 65 cm	71-110 cm

Ref. 400952



Ref. 400955

TAVOLINO MULTIUSO INCLINABILE regolabile a pistone

CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Piano unico inclinabile (0-330°), lavabile, ignifugo, antigraffio e ad alta resistenza
- > Regolazione dell'altezza a pistone
- > Munito di quattro ruote piroettanti di cui due con freno
- > Colore antracite

	
DIMENSIONE PIANO	REGOLAZIONE IN ALTEZZA
48 X 78 cm	76-117 cm

PEDALIERA PER RIABILITAZIONE

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio
- > Regolazione dell'intensità dell'esercizio
- > Piedini in gomma antiscivolo



Ref.400630

PEDALIERA PER RIABILITAZIONE con display digitale

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Display digitale con funzione di timer, indicazione del numero di esercizi effettuati, della velocità e delle calorie consumate
- > Piedini in gomma antiscivolo per maggiore stabilità e sicurezza



Ref.400631

SGABELLO GIREVOLE

CARATTERISTICHE

- > Base in plastica
- > Sedile imbottito in PU
- > Regolabile in altezza



Ref.400668



Ref.400665

PREDELLINO a 2 gradini

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio
- > Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo
- > Piedini in gomma antiscivolo